

Blefarix Toalhetes

LIMPEZA DE PÁLPEBRAS E PESTANAS

A pele na zona da pálpebra é particularmente sensível e merece um cuidado especial. Em determinadas circunstâncias pode aparecer nessa zona um excesso de escamação e formação de gordura (hiperprodução seboreica), que lhe conferem um aspecto descuidado e com falta de higiene. Blefarix toalhetes estão destinados para uma ótima limpeza das pálpebras. Com a aplicação local elimina-se o excesso de escamação e de gordura de forma intensiva mas segura. Blefarix toalhetes é adequado para bebés, crianças e adultos.

Instruções de Utilização

Retirar um toalhete da saqueta e limpar as pálpebras mantendo os olhos fechados. Recomenda-se a utilização de um toalhete para cada pálpebra. Massajar suavemente para retirar as partículas aderentes; não é necessário fazer muita pressão. Se necessitar, pode limpar o canto da pálpebra com a extremidade do toalhete sem tocar no globo ocular. Aplicar sempre que as pálpebras necessitem ser limpas. Os toalhetes de Blefarix são apenas de uma única utilização e apresentam-se esterilizados para garantir a higiene de aplicação.


Precauções

Blefarix toalhetes foram criados sem componentes irritantes, no entanto deve-se evitar o contacto directo com a mucosa ocular. Se tal acontecer, lavar abundantemente com água sem friccionar.

Apresentações

Toalhetes de uma única utilização impregnados com 2,5 ml de solução.
Embalagem com 20 toalhetes.

F-6829325A

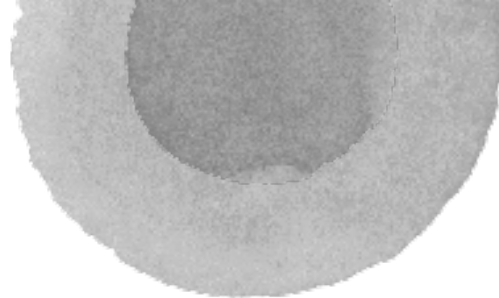

Blefarix

Toalhetes/Wipes/Lingettes

Higiene de párpados y pestañas

Hygiene for eyelids and eyelashes

Hygiène des paupières et des cils

Limpeza de pálpebras e pestanas

Toallitas unidosis estériles

Single-dose sterile wipes

Lingettes monodoses stériles

Toalhetes de uma única utilização esterilizados

Laboratorios Viñas

Blefarix Wipes

HYGIENE FOR EYELIDS AND EYELASHES

The skin around the eyelids is particularly sensitive and deserves special care. In certain circumstances, excess flakiness can appear in this area, and sebum (seborrhoea) can form, making the skin look uncared for and unhygienic. Blefarix wipes are specially designed to assist optimum cleansing of eyelids. Applied locally, excess flakiness and seborrhoea are removed, intensively yet safely.

Blefarix wipes are suitable for babies, children and adults.

Directions for Use

Take a wipe out of its sachet and clean eyelids, keeping eyes closed. We recommend using one wipe for each eyelid. Massage gently to remove any particles that have become stuck; you do not need to rub hard. If necessary, the edge of the eyelid can be cleansed with one end of the wipe, taking care not to touch the eyeball.

Use whenever eyelids require cleansing.

Blefarix wipes are designed for one single use, and they are supplied sterilized, to guarantee hygienic application.

Precautions

Blefarix wipes have been formulated free from irritants; you should nonetheless avoid direct contact with the mucous membrane of the eye. In case of accidental contact, rinse thoroughly with water, taking care not to rub the area.

Presentations

Single-dose wipes impregnated with 2.5 ml of solution.

Pack with 20 wipes.

Blefarix Lingettes

HYGIÈNE DES PAUPIÈRES ET DES CILS

La peau de la zone palpébrale est particulièrement sensible et mérite un soin spécial. Dans certaines circonstances, une desquamation excessive et la formation de sébum (séborrhée) peuvent apparaître dans cette zone, ce qui lui donne une apparence négligée et de manque d'hygiène. Blefarix lingettes est conçu pour faciliter un nettoyage optimal des paupières. Son application locale permet d'éliminer de manière intensive mais sûre la desquamation excessive et la séborrhée.

Blefarix lingettes convient aux bébés, aux enfants et aux adultes.

Mode d'emploi

Retirer une lingette de la pochette et nettoyer les paupières en gardant les yeux fermés. Il est recommandé d'utiliser une lingette pour chaque paupière. Effectuer un léger massage pour ôter les particules collées; il n'est pas nécessaire d'exercer une forte pression. Le bord de la paupière peut être éventuellement nettoyé avec une extrémité de la lingette, en veillant à ne pas toucher le globe oculaire.

Appliquer chaque fois que les paupières doivent être nettoyées. Les lingettes de Blefarix sont à usage unique et sont stérilisées afin de garantir une application hygiénique.

Précautions

Blefarix lingettes a été formulé sans composants irritants, cependant on évitera le contact direct avec la muqueuse oculaire. Si celui-ci se produisait, rincer avec beaucoup d'eau en veillant à ne pas frotter.

Présentations

Lingettes monodoses imprégnées de 2,5 ml de solution.

Étui avec 20 lingettes.